


AEMP: Bereit sein für Veränderungen

17.–18. Juni 2026 im Kongresshaus Biel/Bienne

SRDM: adapter pour adopter

17–18 juin 2026 au Palais des Congrès à Biel/Bienne

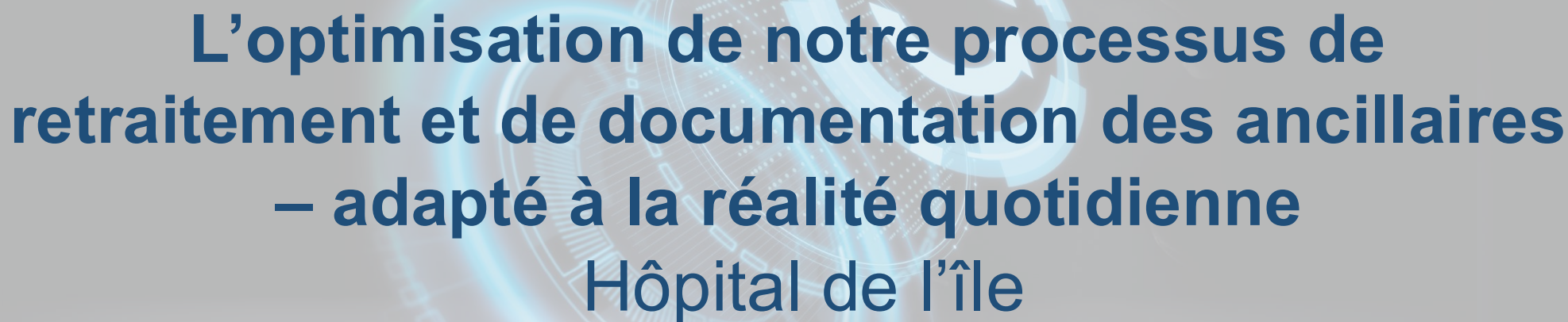

**L'optimisation de notre processus de
retraitement et de documentation des ancillaires
– adapté à la réalité quotidienne
Hôpital de l'île**

Aperçu de notre SRDM



- Retraitement pour env. 50 salles d'opération de divers spécialités (neurologie, orthopédie, cardiologie et angiologie, chirurgie thoracique, gynécologie, urologie et chirurgie pédiatrique)
- Env. 60 collaborateurs et collaboratrices en SRDM
- Nous retraitons en moyenne 250 UTS dont 11 UTS d'ancillaires

Introduction

Que sont les ancillaires ?

Des dispositifs médicaux spécifiques choisis pour des interventions chirurgicales et misent à disposition pour le fabricant, un fournisseur ou un autre hôpital en prêt.

Souvent il s'agit de sets complexes et spécialisés

But de la présentation :

Démontrer les processus de retraitement des ancillaires de l'hôpital de l'île.

Défis lors du retraitement des ancillaires

- Documenter et tracer le processus de retraitement.
- Garantir que les sets sont complets.
- Respecter les indications de retraitement et de prise en charge des fabricants.
- Respecter les exigences légales.
- Travailler sous pression de temps surtout pour les sets express.

Il est recommandé que les instruments chirurgicaux en prêt soient livrés dans un délai minimal de 48 heures avant l'intervention.

Situation de départ / ancien processus

Système existant, partiellement basé sur papier

Création d'étiquettes mais sans listes électroniques de recomposition

Désavantages :

- Documentation en papier :
 - Besoin de place pour l'archivage
 - Désavantages hygiéniques
 - Recherche de documents chronophage lors de réclamations
- Souvent réclamations car sets incomplets

Grande nécessité de développer un système numérique et transparent

Développement du concept

- Détecter et analyser le problème
- Apporter et définir une idée
- Établir un concept des données de base
- Élaborer un diagramme du processus (Flowchart)
- Commander le matériel nécessaire
- Contacter les fournisseurs
- Informer le personnel du bloc et présenter des exemples
- Former le personnel en SRDM
- Introduire le système
- Garantir l'évolution constante et organiser formations


Déroulement

1. Commande des sets d'ancillaires (bloc)

2. Contrôle à la réception (bloc)

Documents assortis :

- Instructions de retraitement
- Bulletin de livraison
- Preuve de retraitement

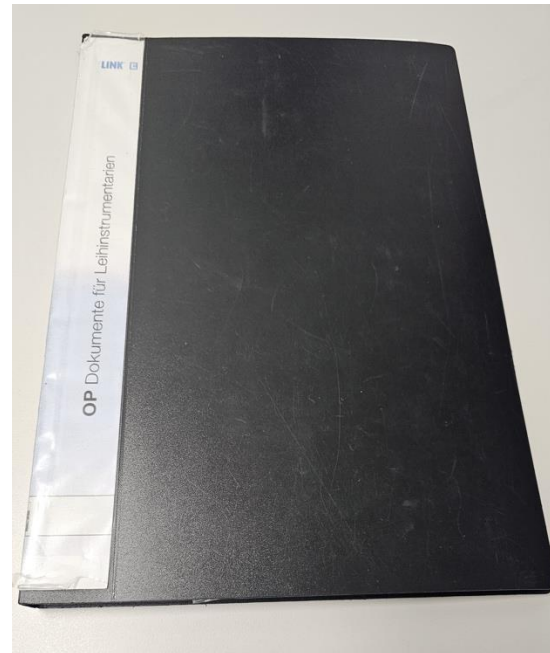

Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) INSELGRUPPE


Leihinstrumente

Durch OP auszufüllen (Pro Leihset ein Formular ausfüllen – ein Leihset kann mehrere Siebe/Trays haben, dann Anzahl Sets/Trays angeben)

Klinik	Orthopädie
Set-Name	Mutars
Name der Firma (Lieferant)	Implantcast
Artikel-Nr.	
Anzahl Set	6 Trays
Haben Sie bestimmte Bemerkungen zur Aufbereitung?	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein
Eingangskontrolle (Lieferschein mit Bestellschein vergleichen) Datum/Visum	29.11.22 L.C.
Benutzung Falls bekannt, wie oft und wann?	Datum 1. Einsatz: 30.11.22 Datum letzter Einsatz: [Signature]

Durch ZSVA auszufüllen:
Hier Etikette(n) aufkleben! (Nur, wenn das Set nach dem **alten System** gepackt wurde!)

7.5 Leihinstrumente_FO-02 N.Hermann_V03_28.02.2023
Platz: L:\DOLS-GRP\ZSVA_QMS\7 Produktreifeisung\7.5 Produktion und Dienstleistungserbringung

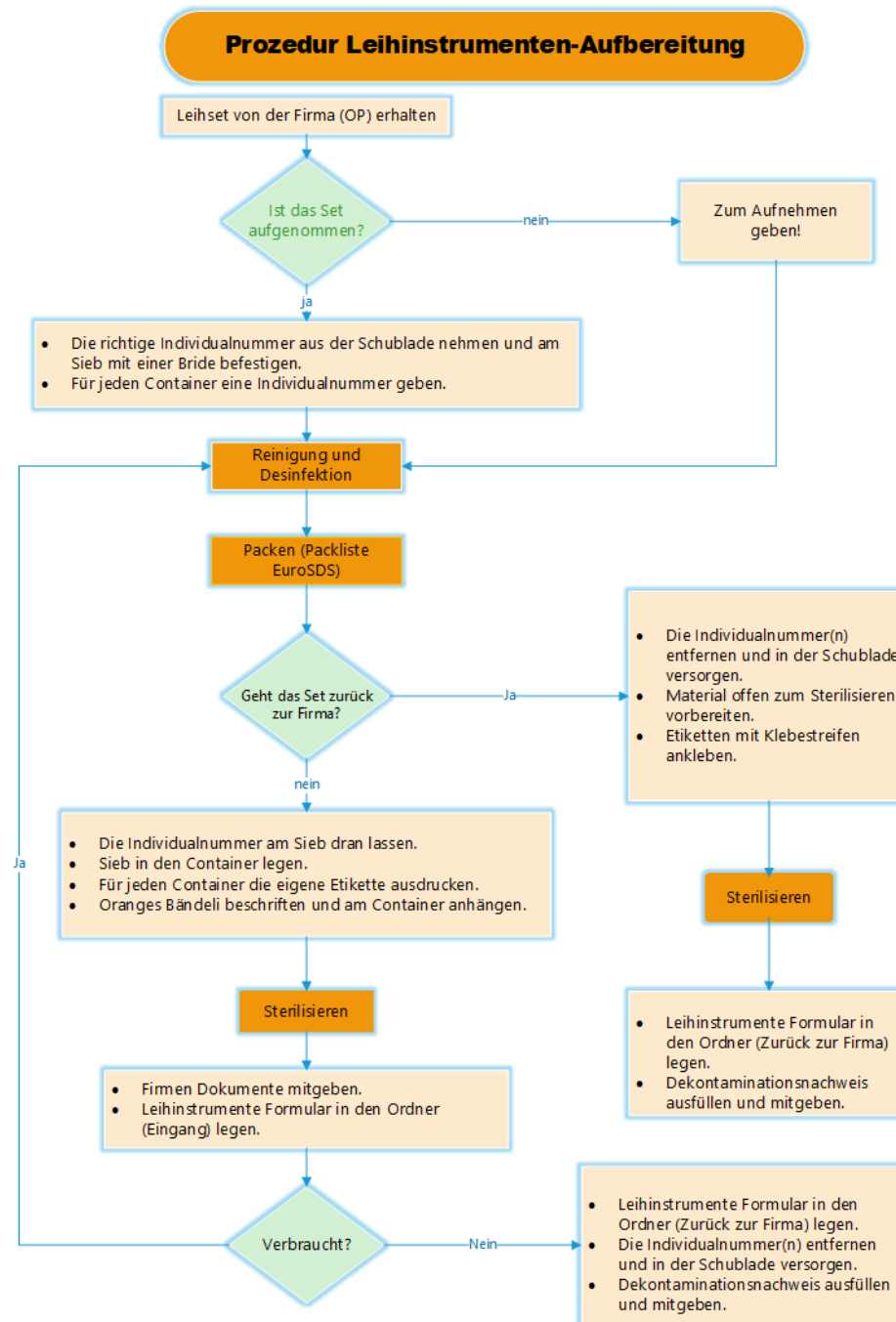

3. Saisie :

EuroSDS Sets / Packlisten - Inselspital Bern

Suchen Sets **Version** Packliste Individual-Nummern

Set: 02-L298 (Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih)

Kürzel* 02-L298

Bezeichnung* Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih

Typ* Instrumenten-Set stillgelegt

Einzel-Instrument Leih-Set Konsignations-Ware Mandanten-unabhängig

Plasma-sterilisiert ja

Bestandsführung* bis Rücknahme automatischer Verbrauch Ja

Eigentümer* 15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie)

Produktgruppe* Leihset Ortho (LEIHORTH0)

Risiko-Gruppe Kritisch A

Alternativ-Bezeichnung

MaWi-Nr.

Kommentar

Lagerort

Ausgabe an 15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie) automatisch

Mindestbestand auf Ausgabe-Kostenstelle

Formular Standard

Packplatz autom. Protokolldruck Rücknahme autom. Protokolldruck

Bestand 4

Lebensdauer Aussonderung nach ... Gebrauch-Zyklen

Service Intervall Service nach ... Gebrauch-Zyklen

Kategorie

Scancode

geändert am 31.12.2024 13:02

Sulaiman Rana

EuroSDS Sets / Packlisten - Inselspital Bern

Suchen Sets Version **Packliste** Individual-Nummern

Version: 02-L298 (Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih) / 2

Version 2 vom 13.12.2024 in Gebrauch

Versions-Kommentar Die Operation ist am 15.12.24 geplant!

RD-Programm* 01 - INSTR nur Desinfektion

Sterilisations-Programm 03 - UNISD134C vorgeschriebenes Sterilisationsprogram

Berechtigungen* P1

Druckvorlage* sds-label.lab

Produktionsmenge* 1

Anzahl Etiketten* 1 Anzahl gedruckter Etiketten pro Produktionsmenge

Arbeitsanweisung

Lagerdauer 365 Tage

STE 1.00 Sterilguteinheiten

Aufbereitungszeit 30 automatisch berechnet

Sachkosten 67.00 CHF

Personalkosten CHF

Gewicht Gramm automatisch berechnet

Beschaffungskosten CHF

Aufbereitungskosten CHF automatisch berechnet

Verpackungsart

GTIN

Packliste proclpackingLists/pl_102251.html

geändert am 13.12.2024 12:15

geändert von Sulaiman Rana

Sulaiman Rana

Packplatz

Kürzel	Name	Indiv
Filter / Eingabe	ortho-leih	Filter
02-L290	Leih Shoulder Revision Instr./J+J DePuy Synthes / OP Ortho-Leih	2
02-L291	Leih Global Advantage Instr../J+J DePuy Synthes / OP Ortho-Leih	1
02-L292	Leih Coonrad-Morrey/Zimmer / OP Ortho-Leih	2
02-L294	Leih Expedium Anterior Instr. + Impl./J+J DePuy Synthes/ OP Ortho-...	3
02-L295	Leih Advanced Tibia Nägel/J+J DePuy Synthes / OP Ortho-Leih	3
02-L296	Leih Hüftrevision / Gomina / OP Ortho-Leih	1
02-L297	Leih Navigation Symphony instr. / J&J Depuy Synthes / OP Ortho-Leih	1
02-L298	Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih	4
02-L299	Leih LCP Uln Osteot 2.7/ OP Ortho-Leih	1
02-L300	Leih Schraubendreher CCS 4.0/ medartis/ OP Ortho-Leih	1
02-L301	Leih EPD Spine CMF Neuro Set / J+J Depuy Synthes/ OP Ortho-Leih	1
02-L302	Leih IPS / Medkoh / OP Ortho-Leih	1
02-L303	Leih Liss/J+J Depuy Synthes / OP Ortho-Leih	2

02-L298 Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih

Set	Packliste	Packliste (PDF)
Produktgruppe	LEIHORTHO (Leihset Ortho)	
Risiko-Gruppe	Kritisch A	
Artikel-Nr.		
RDG-Programm	INSTR - Instrumente	
Sterilisatorprogramm	UNISD134C - Universalprogramm SD 134 °C	
Kommentar		
Arbeitsanweisung		
Verpackungsart		
Kostenstelle (Eigentümer)	15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie)	
Kostenstelle (Ausgabe an)	15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie)	
Lagerort		
Produktionsmenge	1	
Anzahl Etiketten	1	

02-L298-01 x

02-L298 02-L298-01 Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih Version: 3
gültig seit: 13.01.25

	P...	Bezeichnung
		Filter / Eingabe
		7.1 Grafik Prozess Packen_VA-01.pdf
		Leihset! Packen wie auf Fotos und Dokumentationen unten!
		Zwei Deckel wurden in OP Ortho zurückgeschickt 12.12.2024
		02-L298@1669733253928.jpg
		02-L298@1669733368315.jpg
Bilder		
		02-L298@1669733396907.jpg
		02-L298@1669733425244.jpg
		02-L298@1669733478037.jpg
		02-L298@1669733504980.jpg
		02-L298-Lieferschein.pdf
		02-L298-1.pdf
		Falls das Set zur Firma geht, die Individualnummer entfernen und in der Schublade versorgen! Offen sterilisieren!
		Die Container sind nicht beschriftet!! Auf neutrale Container verteilen!

✓ Auf die Plätze. Fertig. Packt!

In Revision setzen

Abbrechen

Packen

Set - Mediathek x

Weitere Dateien

Set - Informationen x

Bild x

13.12.2024

02-L298 Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih **ips**

[customdocumentade02-L298-Lieferschein.pdf](#)

Art.	Name	Kürzel	Artikel-Nr.	FKZ	Besonderheiten
					customdocumentade02-L298-Lieferschein.pdf

Packen Sie das Leihset gemäß den untenstehenden Fotos und Dokumenten!

Zwei Deckel wurden in OP Ortho zurückgeschickt 29.11.2022

29.11.2022 Dieses Foto ist nicht auf Firma Dokument!




29.11.2022




29.11.2022




29.11.2022



29.11.2022



29.11.2022




[customdocumentade02-L298-Lieferschein.pdf](#)

[customdocumentade02-L298-1.pdf](#)

Falls das Set zur Firma geht, die Individualnummer entfernen und in der Schublade versorgen!
Offen sterilisieren!

Die Container sind nicht beschriftet! Auf neutrale Container verteilen!

MUTARS® Probe Container
MUTARS® trial container
REF 7999-7701

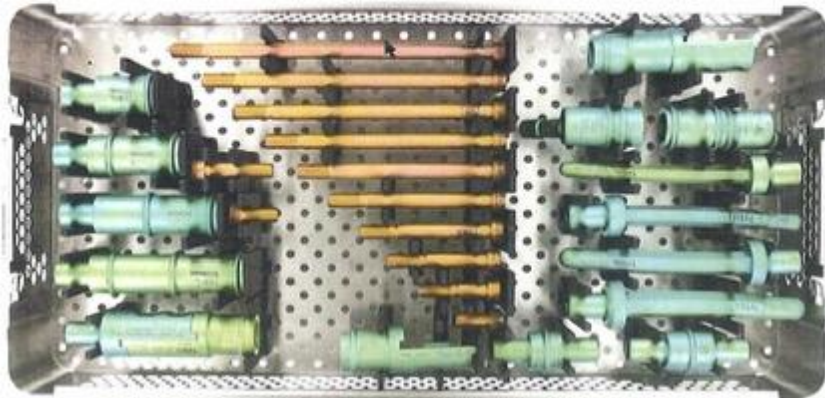

MUTARS® Probeverbindungsstück 100 mm
MUTARS® trial connecting part 100 mm ✓
REF 7730-0100

MUTARS® Probe Verbindungsstück für mod. prox. Tibia
MUTARS® trial extension piece for mod. prox. tibia
REF 7750-0105 105mm ✓
REF 7750-0125 125mm ✓

MUTARS® Probeverlängerungshülse
MUTARS® trial extension piece
REF 7772-2504 40mm ✓
REF 7772-2506 60mm ✓
REF 7772-2508 80mm ✓
REF 7772-2510 100mm ✓

MUTARS® Probefemurschaft
MUTARS® trial femoral stem
REF 7760-0011 11mm ✓
REF 7760-0013 13mm ✓
REF 7760-0015 15mm ✓
REF 7760-0017 17mm ✓

MUTARS® Probeschraube
MUTARS® trial bar screw
REF 7792-1002 M10x25mm x2 ✓
REF 7792-1004 M10x45mm x2 ✓
REF 7792-1006 M10x65mm ✓
REF 7792-1008 M10x85mm ✓
REF 7792-1010 M10x105mm ✓
REF 7792-1012 M10x125mm ✓
REF 7792-1014 M10x145mm ✓
REF 7792-1016 M10x165mm ✓
REF 7792-1018 M10x185mm ✓
REF 7792-1020 M10x205mm ✓



29. 11. 22 L.C

Packplatz

Kürzel	P	Vorgang	
02-L298-01		Ausgegeben	
02-L298-02		Ausgegeben	
02-L298-03		Ausgegeben	
02-L298-04		Ausgegeben	


02-L298 **Leih MUTARS / Implantcast / OP C**

Set
Packliste
Packliste (PDF)

Produktgruppe	LEIHORTHO (Leihset Ortho)
Risiko-Gruppe	Unkritisch
Artikel-Nr.	
RDG-Programm	INSTR - Instrumente
Sterilisatorprogramm	UNISD134C - Universalprogramm SD 134 °C
Kommentar	
Arbeitsanweisung	
Verpackungsart	
Kostenstelle (Eigentümer)	15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie)
Kostenstelle (Ausgabe an)	15200-ORTHO-OP (Orthopädische Chirurgie)
Lagerort	
Zykluszähler	- (bis Service) / - (bis Aussonderung)



4. Nettoyage et désinfection selon les instructions du fabricant

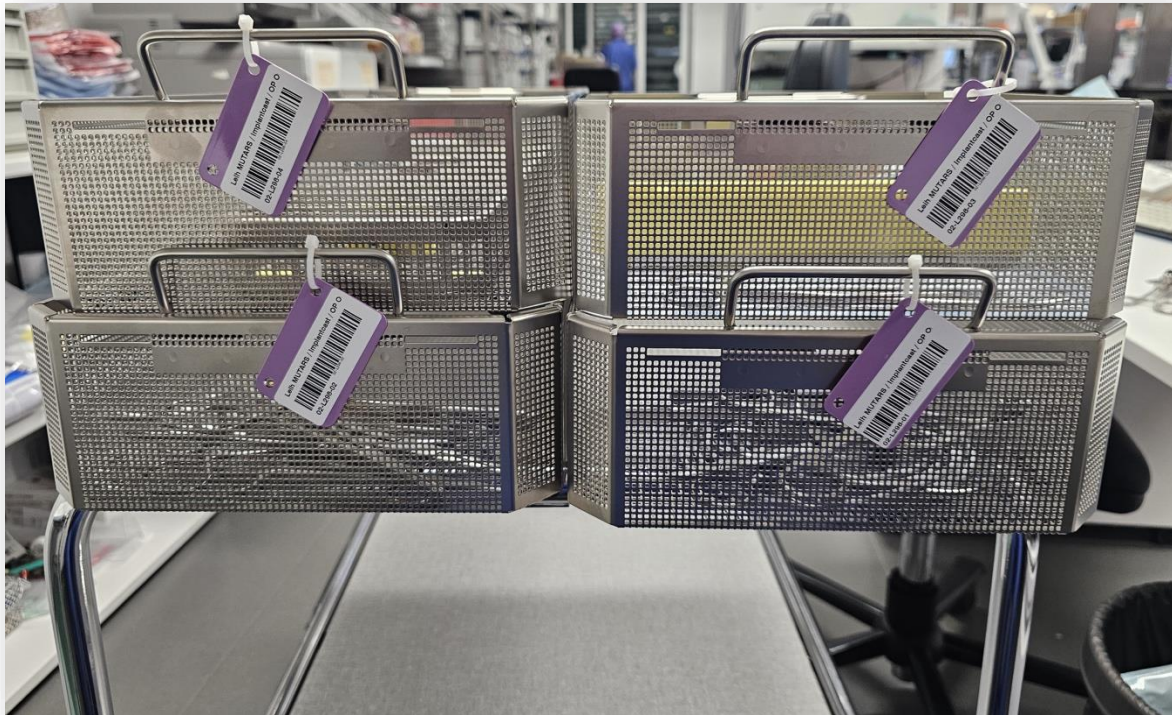

5. Emballage

Selon liste

02-L298-01

02-L298 02-L298-01 Leih MUTARS / Implantcast / OP Ortho-Leih

Pos.	Bezeichnung
	Filter / Eingabe
☰	Zwei Deckel w
☰	02-L298@1669
📄	02-L298@1669
📄	02-L298@1669
📄	02-L298@1669
📄	02-L298@1669
☰	02-L298@1669
📄	02-L298-Liefer
📄	02-L298-1.pdf
📄	02-L298-2.pdf
📄	02-L298-3.pdf
📄	02-L298-4.pdf
📄	02-L298-5.pdf

Packoptionen / 02-L298-01 ✕

Status

Produktionsmenge

Anzahl Etiketten

Kommentar

Priorität

Anforderung


Kostenstelle


✕ Abbrechen
📄 Packen

6. Stérilisation



Prozedur Leihinstrumenten-Aufbereitung

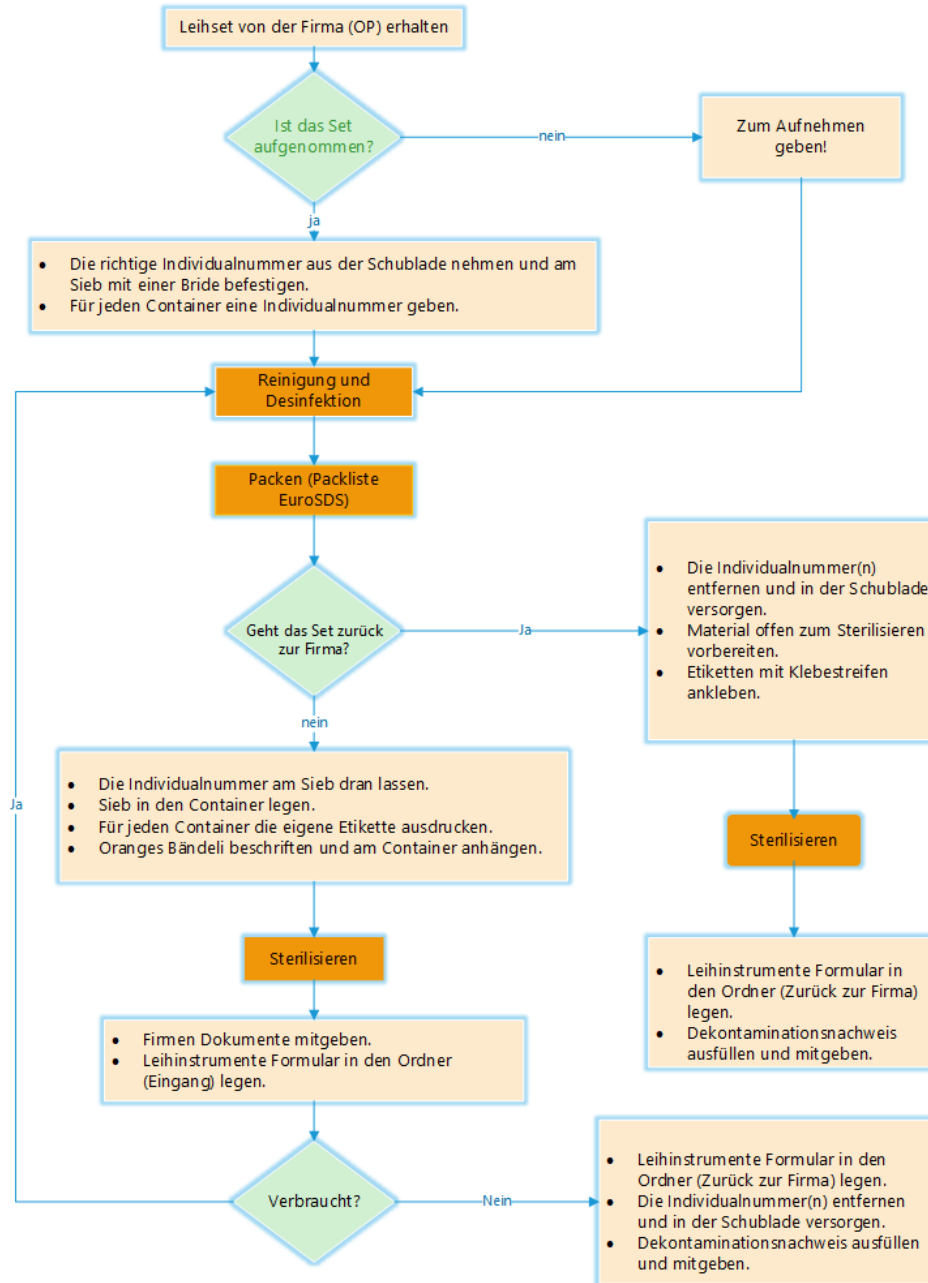

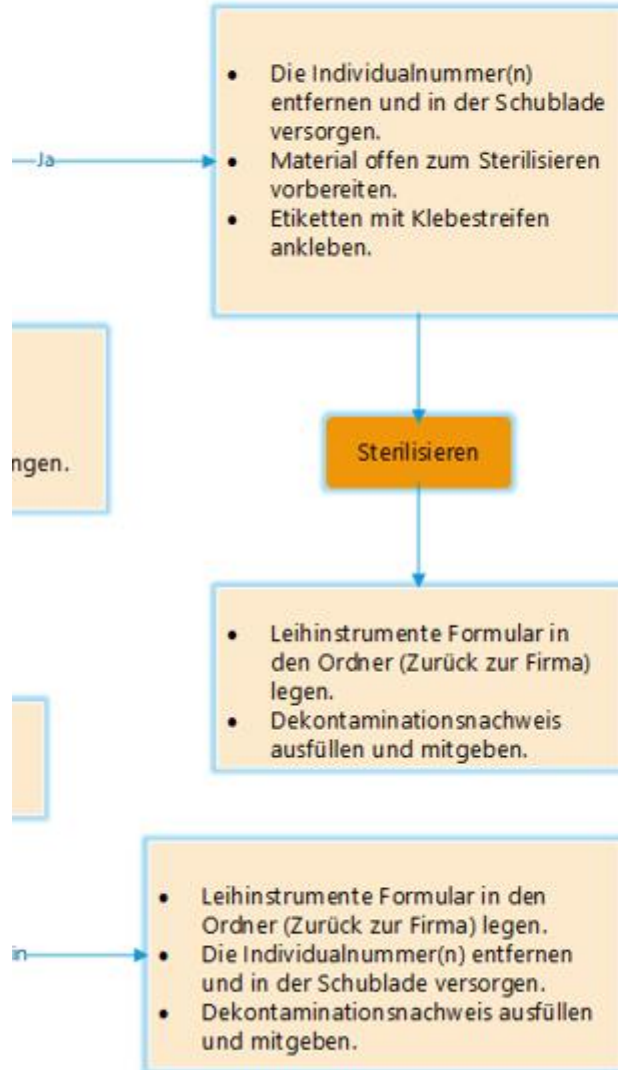

Formular
Dekontaminationssachweis / Hygiene-Untersuchungsbescheinigung

Formular
Leihinstrumente



Formular
Dekontaminationssachweis / Hygiene-Untersuchungsbescheinigung

Formular
Leihinstrumente







Zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA)

**Dekontaminationsnachweis/
Hygiene-Unbedenklichkeitsbe**

Ich bestätige hiermit, dass:

Name Set/Instrument: Mutars

NICHT mit Blut, Gewebe, Körpersubstanz in Kontakt gekommen, und somit hygienisch (s.u.) bestätigt.


während der Anwendung mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Dieses Produkt wurde gem. den aktuell geltenden Anforderungen der Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Dies wird durch die Unterschrift (s.u.) bestätigt.

Reinigung und Desinfektion maschinell / manuell
 Dampfsterilisation 134 °C / 18 Min.
 Anderes Verfahren (bitte angeben) _____

NICHT dekontaminiert werden konnte (Begründung dafür zwingend erforderlich!)

Stempel der Einrichtung 30

7.5.1 Dekontaminationsnachweis_VA-08
Pfad: I:_DOKS-GRP\ZSVA_QMS\7 Produktrealisierung\7.5.1 Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung\7.5.1 Lenkung der Produktion

 INSELGRUPPE

Zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA)

**Dekontaminationsnachweis/
Hygiene-Unbedenklichkeitsbescheinigung**

Ich bestätige hiermit, dass:

Name Set/Instrument: Mutars / Implantat

NICHT mit Blut, Gewebe, Körpersubstanzen oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen, und somit hygienisch unbedenklich ist. Dies wird durch die Unterschrift (s.u.) bestätigt.

während der Anwendung mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Dieses Produkt wurde gem. den aktuell geltenden Anforderungen der Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten sowie gem. den Herstellerangaben gereinigt, desinfiziert und sterilisiert. Dies wird durch die Unterschrift (s.u.) bestätigt.

Reinigung und Desinfektion maschinell / manuell
 Dampfsterilisation 134 °C / 18 Min.
 Anderes Verfahren (bitte angeben) _____

NICHT dekontaminiert werden konnte (Begründung dafür zwingend erforderlich!)

Stempel der Einrichtung 80.11.22 D. D.
Datum Unterschrift

7.5.1 Dekontaminationsnachweis_VA-08 Niermann_V08_03.03.2020
Pfad: I:_DOKS-GRP\ZSVA_QMS\7 Produktrealisierung\7.5.1 Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung\7.5.1 Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung

Packplatz

Kürzel	P	Vorgang
01-HL01-01		Ausgegeben

1 Einträge

[← Zurück zur Set-Ansicht](#)

Individual-Historie (21.11.2023 15:52 - 21.11.2024 15:52)

01-HL01-01 (01-HL01 Leih Kraniotom / Stryker / HGE-Leih)

Zeitpunkt	Etikett	Vorgang	Vorgangs-Nr.	Von Kostenstelle
13.08.2024 19:21	02543751	Ausgegeben	L00186933	
13.08.2024 19:21	02543751	Steri freigegeben	15010936	
13.08.2024 19:09	02543751	Steri OK	15010936	
13.08.2024 17:26	02543751	Steri beladen	15010936	
13.08.2024 16:56	02543751	Gepackt	02543751	
13.08.2024 16:45	02543751	RD freigegeben	21025445	
13.08.2024 16:01	02543751	RD OK	21025445	
13.08.2024 15:01	02543751	RD beladen	21025445	
13.08.2024 15:01	02543751	RD storniert	21025444	
13.08.2024 15:00	02543751	RD Fehler	21025444	
13.08.2024 14:55	02543751	RD beladen	21025444	
13.08.2024 13:15	02542976	Verbraucht		
13.08.2024 07:08	02542976	Transport	L00186944	30200-INOD-OP (OP-Z

📄 Prozess-Datei
📷 Foto-Dokumentation
🗨️ Reklamation

Avantages

- Garanti la traçabilité grâce à une documentation complète.
- Pas besoin d'archiver sur papier grâce à l'archivage numérique de tous les documents dans le système (gain de place et plus hygiénique).
- Archivage numérique des programmes de nettoyage et de désinfection, consultables par code bar.
- Instructions de soins et de montage archivées numériquement et à tout instant consultable pour le personnel.
- Particularités éventuelles des sets d'ancillaires ainsi que le feedback du personnel documentés dans le système et consultables.
- Garanti que les sets sont complets (photos, documents et bulletin de livraison archivés avec la liste de reconstitution).
- Gain de temps et d'argent grâce au code bar et liste de reconstitution pour un retraitement plus rapide et plus efficace.
- Accès rapide aux données dans le domaine par rapport à la documentation papier.

Statistiken

Etikett, Chargen-Nr., Individual-N

Etiketten

- Pack-Protokoll
- Etiketten-Historie
- Verfallsprotokoll
- Unvollständige Kreisläufe
- Chargenetiketten
- Ausgabe-/Transport-Protokoll
- Kostenstatistik
- Rücknahme-Protokoll

Sets

- Durchlaufzeiten
- Tagesauslastung
- Hit-/Ladenhüter-Liste
- Set-Statistik
- Set-Packzeiten
- Anforderungen
- Individual-Historie

QM-Dokumentation

- Set-Begleitscheine
- Instrumenten-Reklamationen

Maschinen

- Maschinenstatistik
- Prozess-Protokoll
- Pack-Protokoll

Hilfe

Pack-Protokoll

Zeitraum

Gepackt Von 01.04.25 07:28:29

Bis 30.04.26 23:59:59

Set

Kürzel

Bezeichnung

Individual-Nr.

Set-Typ

Einzel-Instrument

Leih-Set

Konsignations-Ware

Mandanten-unabhängig

Produktgruppe LEHORTH0 (Leihset Ortho)

RDG-Programm

Sterilisatorprogramm

Kostenstelle (Ausgabe an)

Zurücksetzen

Pack-Protokoll

Protokoll

Etikett	Gepackt am	Kürzel	Bezeichnung	Individual-Nr.
02915903	30.04.2026 14:37	02-L371	Leih LARS/Curmed/ OP Ortho-Leih	02-L371-01
02915453	29.04.2026 20:00	02-L465	Leih Pro Disc Vivo / Centinel Spine/Nexon / OP Ort...	02-L465-01
02915446	29.04.2026 19:50	02-L226	Leih Nuvasiv Precice Nagel/curmed / OP Ortho-Leih	02-L226-01
02915445	29.04.2026 19:24	02-L226	Leih Nuvasiv Precice Nagel/curmed / OP Ortho-Leih	02-L226-02
02914594	28.04.2026 19:06	02-L371	Leih LARS/Curmed/ OP Ortho-Leih	02-L371-01
02914620	28.04.2026 19:01	02-L130	Leih BI-Mentum Primary /J+J DePuySynthes/ OP Ort...	02-L130-02
02914582	28.04.2026 18:42	02-L466	Leih ACTIS-Schaft / J+J DePuy Synthes/ OP Ortho-Leih	02-L466-02
02914576	28.04.2026 18:38	02-L466	Leih ACTIS-Schaft / J+J DePuy Synthes/ OP Ortho-Leih	02-L466-01
02913972	28.04.2026 04:08	02-L464	Leih Glenoid / Zimmer Biomet / OP Ortho-Leih	02-L464-01
02913937	27.04.2026 22:35	02-L466	Leih ACTIS-Schaft / J+J DePuy Synthes/ OP Ortho-Leih	02-L466-01
02913935	27.04.2026 22:27	02-L466	Leih ACTIS-Schaft / J+J DePuy Synthes/ OP Ortho-Leih	02-L466-02
02913922	27.04.2026 22:14	02-L226	Leih Nuvasiv Precice Nagel/curmed / OP Ortho-Leih	02-L226-02
02913921	27.04.2026 21:54	02-L226	Leih Nuvasiv Precice Nagel/curmed / OP Ortho-Leih	02-L226-01
02913842	27.04.2026 20:52	02-L305	Leih NextAR Knee/Medacta / OP Ortho-Leih	02-L305-01
02913777	27.04.2026 20:25	02-O-L26	Leih Sphere LINKS/Medacta / OP Ortho-Leih	02-OL26-01
02913541	27.04.2026 16:36	02-L465	Leih Pro Disc Vivo / Centinel Spine/Nexon / OP Ort...	02-L465-01
02912359	24.04.2026 17:50	02-L464	Leih Glenoid / Zimmer Biomet / OP Ortho-Leih	02-L464-01
02910621	22.04.2026 17:47	02-L309	Leih Sphere RECHTS/Medacta / OP Ortho-Leih	02-L309-01
Anzahl: 1038				

Historie anzeigen

Statistiken

Etikett, Chargen-Nr., Individual-N

Etiketten

- Pack-Protokoll
- Etiketten-Historie
- Verfallsprotokoll
- Unvollständige Kreisläufe
- Chargenetiketten
- Ausgabe-/Transport-Protokoll
- Kostenstatistik
- Rücknahme-Protokoll

Sets

- Durchlaufzeiten
- Tagesauslastung
- Hit-/Ladenhüter-Liste
- Set-Statistik
- Set-Packzeiten
- Anforderungen
- Individual-Historie

QM-Dokumentation

- Set-Begleitscheine
- Instrumenten-Reklamationen

Maschinen

- Maschinenstatistik
- Prozess-Protokoll
- Pack-Protokoll

Hilfe

Set-Begleitscheine

Zeitraum

Ausführungsdatum Von 01.04.24 00:00:00

Bis 30.04.26 23:59:59

Vorgang Reklamationserfassung

Set

Individualnummer beginnt mit

Set-Kürzel beginnt mit

Produktgruppe LEIHORTHO (Leihset Ortho)

Klinik (Eigentümer) ▼

Abteilung (Eigentümer) ▼

Kostenstelle (Eigentümer) ▼

Zurücksetzen

Set-Begleitscheine

Protokoll
Statistik

Etikett	Set-Kürzel	Set-Name	Individualnummer
02742559	02-L216	Leih Anatomical Revision Shoulder /Zimmer / OP Ortho-Leih	02-L216-01
02671868	02-L305	Leih NextAR Knee/Medacta / OP Ortho-Leih	02-L305-01
02805929	02-L305	Leih NextAR Knee/Medacta / OP Ortho-Leih	02-L305-01

0.29%

Anzahl: 3



Désavantages

- Charge de travail pour tout saisir dans le système
- Formations du personnel
- Lots avec numéros individuels → Temps et organisation nécessaires pour passer aux numéros individuels

A

Facteurs centraux du succès

- Soutien de l'équipe et de la direction
- Il a été tenu compte du feedback continu du personnel

Le personnel à été partie intégrante du processus

Augmentation de la motivation et prise de conscience des processus par le personnel

Processus plus stable et plus efficace

Conclusion

En résumé, le bilan de notre expérience démontre que même les petits changements dans le processus peuvent avoir un fort impact.

Dans ce contexte ce n'est pas la méthode en elle-même qui importe mais son application cohérente dans le quotidien.

Appel aux développeurs de logiciels et aux loueurs d'ancillaires

- **Développeurs de logiciels :**

Continuez à développer les modules de prêt afin de simplifier la saisie et la documentation pour les utilisateurs

- **Loueurs d'ancillaires :**

Soutenez les développeurs par des formats numériques adaptés pour les fichiers et la documentation



SGSV
SSSH
SSSO

Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

Biel/Bienne 2026

Merci de votre attention !